

Električna  
zobna ščetka  
**Sonicare FlexCare**




Navodila za  
uporabo

**PHILIPS**  
**sonicare**  
the **sonic** toothbrush

## VSEBINA PAKIRANJA

- A. Higienska potovalna kapica
  - B. Nastavek
  - C. Zamenljiv barvni obroček
  - D. Držalo s protizdrsko oblogo
  - E. Gumb za vklop in izklop
  - F. Gumb za nastavitev ščetkanja po meri
  - G. Indikator načina ščetkanja
  - H. Indikator programa ščetkanja
  - I. Indikator napolnjenosti baterije
  - J. Luksuzni polnilnik (nekateri modeli)
  - K. Pokrov za polnilnik s stojalom za nastavke (nekateri modeli)
  - L. Potovalni polnilnik
  - M. Podnožje polnilnika za ovijanje kabla (nekateri modeli)
  - N. UV-čistilec (UV Sanitizer) z vgrajenim polnilnikom in ovijalnikom kabla (izbrani modeli)
- 
- Ni prikazano: UV-žarnica
  - Ni prikazano: odcejalnik UV-čistilca (UV Sanitizerja)
  - Ni prikazano: ščit za UV-žarnico

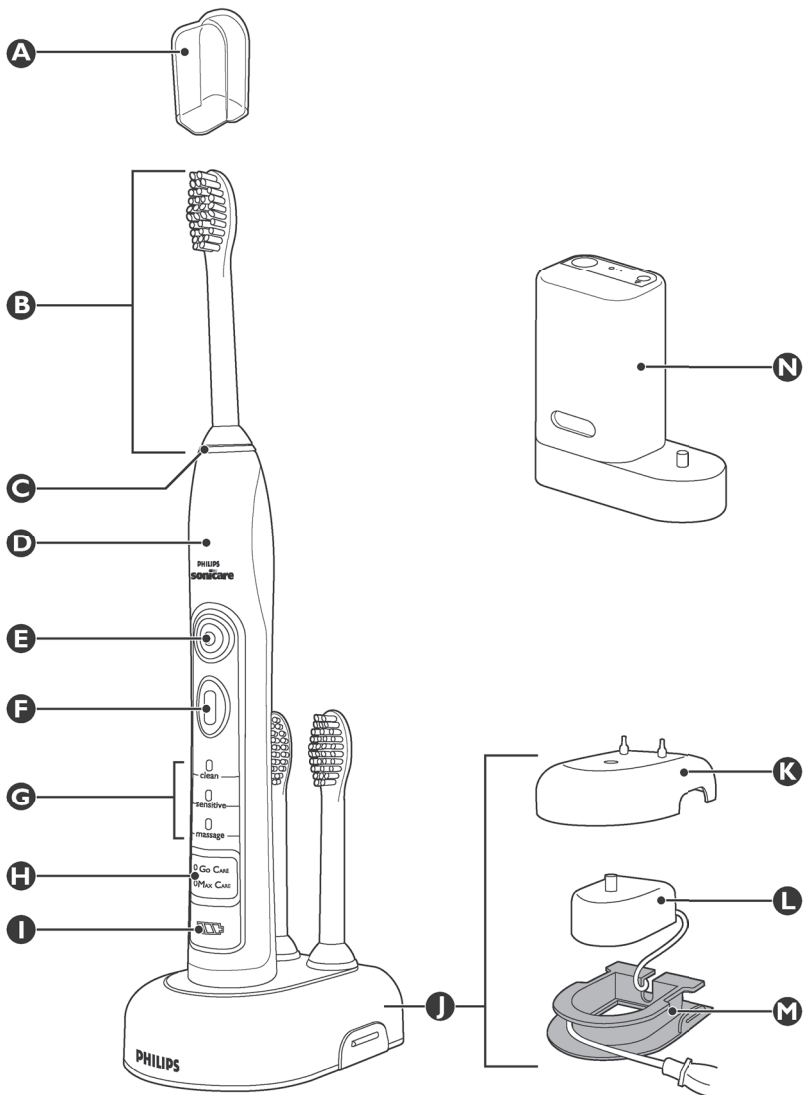

**POZOR!**

Držalo električne zobne ščetke Sonicare FlexCare® je treba pred prvo uporabo polniti neprekinjeno vsaj 24 ur.

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

### PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA.

Pred uporabo naprave preberite navodila in jih shranite, če jih boste morda potrebovali tudi pozneje.

### NEVARNOSTI

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara ali vžiga:

#### NAPETOST

Naprave NE vklaplajte v nobeno drugo vtičnico kot v tisto, ki je navedena na dnu polnilnika in UV-čistilca (UV Sanitizer). Naprava je narejena za uporabo v napetosti od 100 do 240 voltov. Pretvorniki napetosti NE zagotavljajo primerne električne napetosti. Vtiča nikoli s silo ne potiskajte v vtičnico; če ga ne morete z lahkoto vtakniti v vtičnico, prenehajte.

#### VODA

Polnilnika ali UV-čistilca (UV Sanitizer) ne postavljajte ali shranjujte na mestih, kjer lahko pade ali bi ga lahko potegnili v kad, umivalnik ali školjko. NE prijemajte polnilnika ali UV-čistilca, če vam je padel v vodo. Takoj ga izklopite. Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali tuširanjem. Preden polnilnik očistite, ga izklopite in se prepričajte, da je suh, preden ga vklopite v električno vtičnico.

#### OPOZORILA

Da bi zmanjšali nevarnost opeklin, električnega udara, ognja ali poškodb:

1. Napravo prenehajte uporabljati, če je kateri koli del (nastavek, držalo, polnilnik) poškodovan. Ta naprava ne vsebuje servisnih delov. Glejte poglavje »Garancija in servis«, če vaša zobna ščetka Sonicare ne deluje pravilno ali jo je treba popraviti.
2. Nikoli ne uporabljajte polnilnika, če je poškodovan kabel ali vtič. Ne postavljajte ga blizu izvora toplote. Polnilnika ne uporabljajte na prostem.
3. Izogibajte se uporabi nastavkov s polomljenimi ali upognjenimi ščetinami. Poškodovane ščetine se med ščetkanjem lahko odlomijo. Nastavek zamenjajte z novim vsake 3 mesece ali prej, če se pojavijo znaki obrabe. Nepravilno ščetkanje lahko povzroči poškodbe ščetin. (Glejte poglavje »Čiščenje«.)
4. Ta naprava je narejena samo za čiščenje vaših zob, dlesni in jezika. Uporabljajte jo, kot je opisano v teh navodilih. Ščetko prenehajte uporabljati, če začutite neugodje ali bolečino, in se posvetujte z zdravnikom ali zobozdravnikom.
5. Ta naprava ni namenjena za uporabo pri ljudeh (vključno z otroki) z zmanjšano fizično, čutno ali mentalno sposobnostjo ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi naprave nadzirajo ali o uporabi poučijo osebe, odgovorne za njihovo varnost.
6. Otroci naj bodo pod nadzorom. Bodite pozorni na to, da se z napravo ne igrajo.
7. Električna zobna ščetka Sonicare je namenjena osebni uporabi. Ni primerna za uporabo pri pacientih v zobozdravstvenih ordinacijah.
8. Ne uporabljajte drugih delov kot samo tiste, ki jih priporoča proizvajalec.
9. Če vaša zobna krema vsebuje peroksid, sodo bikarbono ali ostale bikarbonate (značilne za belilne zobne kreme) po vsaki uporabi z milom in vodo temeljito očistite nastavke in držalo, sicer se lahko pojavijo razpoke na plastiki.
10. Nastavkov, držala in polnilnika ne čistite v pomivalnem stroju.
11. UV-čistilec prenehajte uporabljati, če UV-žarnica še sveti, ko so vratca UV-čistilca

odprta. Ultravijolična svetloba lahko škodi očem in koži. UV-čistilec naj bo vedno nedosegljiv otrokom.

12. Med UV-čiščenjem in takoj po njem se ne dotikajte UV-luči, ker je UV-žarnica vroča.

#### **TA NAVODILA SHRANITE!**

### **ZDRAVSTVENA OPOZORILA**

---

1. Če ste v zadnjih dveh mesecih imeli poseg v ustih ali operacijo dlesni, se pred uporabo tega proizvoda posvetujte z zobozdravnikom.
2. Z zobozdravnikom se posvetujte tudi, če se pojavi obilno krvavenje po uporabi naprave ali če se krvavenje ne ustavi po enem tednu uporabe.
3. Če imate srčni spodbujevalnik ali katero koli implantirano napravo, se obrnite na svojega zobozdravnika ali proizvajalca teh naprav.
4. Električna zobna ščetka Sonicare je bil preizkušena in je skladna z varnostnimi standardi za elektromagnetne naprave.
5. Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo zobne ščetke Sonicare posvetujte z zdravnikom.


#### **SHRANITE NAVODILA ZA UPORABO!**

## PRIPRAVA


### MENJAVA BARVNIH OBROČKOV

Nastavki za električno zobno ščetko Sonicare imajo priložene barvne obročke, ki jih lahko zamenjate in s tem označite svoj nastavek.

Kako zamenjamo obroček:

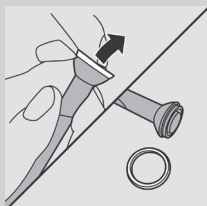


1. Z dna nastavka odstranite barvni obroček.

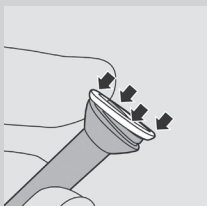

2. Na rob nastavka pritrdite nov obroček. Pritisnite, da se obroček zaskoči.


### PRITRDITEV NASTAVKA

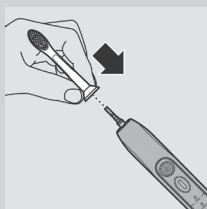

1. Nastavek poravnajte tako, da ščetine gledajo proti lični strani držala.
2. Nastavek trdno pritisnite na jekleni zatič, dokler nastavek ni pritrjen.

*Pomnite! Med pritrjenim nastavkom in držalom se lahko pojavi prostor. To je normalno.*

### POLNJENJE

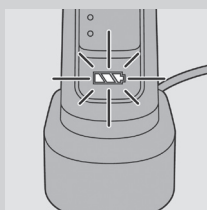

1. Polnilnik vklopite v vtičnico.
2. Na polnilnik postavite držalo.

• Utripajoča lučka na držalu kaže, da se držalo polni.

#### **Indikator napoljenosti baterije prikazuje naslednje:**


- 3 zelene lučke: 75–100-odstotna napolnjenost
- 2 zeleni lučki: 50–74-odstotna napolnjenost
- 1 zelena lučka: 25–49-odstotna napolnjenost
- 1 utripajoča lučka: manj kot 25-odstotna napolnjenost

*Pomnite! Kadar je napolnjenost baterije slaba, boste po 2-minutnem ščetkanju zaslišali tri kratke zvočne signale in videli utripati rumeno lučko (približno 30 sekund).*


*Pomnite! Kadar naprave ne uporabljate, držalo pustite na polnilniku. Tako ohranjate baterijo stalno popolnoma napolnjeno, sicer potrebuje vsaj 24 ur, da se napolni.*

## UPORABA

### TEHNIKE ŠČETKANJA

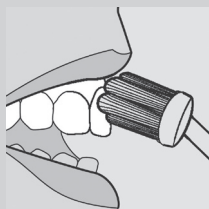


1. Zmočite ščetine in nanje nanesite malo zobne kreme.
2. Ščetine nežno postavite na rob dlesni, nastavek pa naj bo pod rahlim kotom.
3. Vključite zobno ščetko.
4. Rahlo pritisnite, da povečate učinkovitost električne zobne ščetke Sonicare, ki naj delo opravi namesto vas.
5. Nastavek nežno in počasi premikajte po zobeh v kratkih pomikih naprej in nazaj, tako da daljše ščetine sežejo med vaše zobe. Take gibe nadaljujte ves cikel ščetkanja.

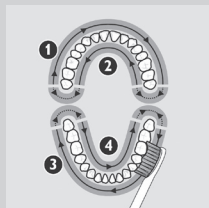

*Pomnite! Svoja usta razdelite na štiri področja in uporabite funkcijo Quadpacer (glejte poglavje »Funkcije«). S tem boste vse zobe enakomerno in temeljito očistili.*

6. Začnite ščetkati področje 1 (zunanje ploskve zgornjih zob) in čistite 30 sekund, nato pa se pomaknite k področju 2 (notranje ploskve zgornjih zob). Ščetkanje nadaljujte na področju 3 (zunanje ploskve spodnjih zob), čistite 30 sekund in se pomaknite na področje 4 (notranje ploskve spodnjih zob).
7. Ko ste končali ščetkanje, namenite nekaj časa še čiščenju griznih ploskev zob in področju, kjer se pojavljajo madeži. Z vklopljeno ali izklopljeno zobno ščetko lahko očistite tudi jezik.

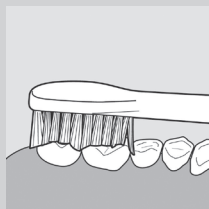

Vaša električna zobna ščetka Sonicare je varna pri uporabi:

- tudi če imate fiksni ortodontski aparat (ščetine nastavkov se pri ščetkanju ortodontskih aparatov hitreje obrabijo),
- tudi če imate mostičke, implantate, plombe, krone, prevleke.

### OSEBNE NASTAVITVE

Električna zobna ščetka Sonicare samodejno začne čistiti v privzetem načinu Clean.

1. Preden vključite električno zobno ščetko Sonicare, pritisnite gumb za nastavek ščetkanja po meri, da izberete način in program ščetkanja.
  - Zelena lučka prikazuje izbrani način ali program ščetkanja.

*Pomnite! Ko je zobna ščetka vključena, lahko izbirate med načini, vendar ne med programi ščetkanja.*

## NAČINI ŠČETKANJA

### Način Clean

standardni način za odlično čiščenje

### Način Sensitive

nežno, a temeljito čiščenje za občutljive dlesni in zobe

### Način Massage

nežna masaža dlesni

## PROGRAMI ŠČETKANJA

**Program Go Care:** 1-minutni cikel ščetkanja v načinu Clean, za hitro umivanje zob. V 15-sekundnih intervalih boste zaslišali zvočni signal Quadpacer.

**Program Max Care:** 3-minutni cikel ščetkanja, ki združuje načina Clean in Massage za temeljito čiščenje ust. Kombinacija 30 sekund načina Clean in 15 sekund načina Massage za vsako od 4 področij vaših ust. V 45-sekundnih intervalih boste zaslišali zvočni signal Quadpacer.

**Pomnite! V kliničnih raziskavah je električna zobna ščetka Sonicare nastavljena na 2-minutni način Clean. Držalo mora biti maksimalno napolnjeno. Izklopite funkcijo Easy-start. Področja, kjer se pojavljajo madeži, ščetkajte dodatnih 30 sekund.**

## FUNKCIJE

### FUNKCIJA EASY-START

- Pri tem modelu električne zobne ščetke Sonicare je funkcija Easy-start že vključena.
- Funkcija Easy-start postopoma povečuje moč ščetkanja prvih 14 ščetkanj.

*Pomnite! Vsako ščetkanje mora trajati vsaj 1 minuto, da se pravilno pomikate skozi funkcijo Easy-start.*

Izključitev in vključitev funkcije Easy-start

- 1.** Nastavek s ščetko pritrdite na držalo.
- 2.** Držalo postavite na polnilnik, ki je priključen na električno omrežje.

#### Izključitev funkcije Easy-start

Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 5 sekund. Funkcija Easy-start je izključena, ko zaslišite en kratek pisk.


#### Vključitev funkcije Easy-start

Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 5 sekund. Funkcija Easy-start je vključena, ko zaslišite dva kratka piska.



*Pomnite! Daljša uporaba funkcije Easy-start ni priporočljiva, saj se zmanjša učinkovitost odstranjevanja zobnih oblog.*

## QUADPACER – INTERVALNI MERILNIK ČASA

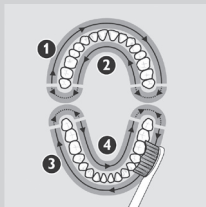

Quadpacer je intervalni merilnik časa, ki vas z zvočnim signalom in kratko prekinitvijo ščetkanja opomni, da ščetkate vsa štiri področja zob. Intervalni merilnik časa vas med ščetkanjem opozarja v različnih intervalih – odvisno od tega, kateri program ali način ščetkanja ste izbrali. Preberite tudi poglavji »Uporaba« in »Osebnne nastavitve«.

Merilnik časa Quadpacer je vključen.


1. Če ga želite izkjučiti, postavite držalo s pritrjenim nastavkom na polnilnik, ki je priključen na električno omrežje.
2. Če želite merilnik izključiti, pritisnite gumb za nastavev ščetkanja po meri in ga držite 5 sekund. Slišali boste en kratek zvočni signal.
3. Če želite merilnik vključiti, pritisnite gumb za nastavev ščetkanja po meri in ga držite 5 sekund. Slišali boste dva kratka zvočna signala. Merilnik časa Quadpacer je ponovno vključen.

*Pomnite! Merilnika časa Quadpacer ne morete izključiti, če ste pred tem izbrali program Go Care ali Max Care.*

## MERILNIK ČASA SMARTIMER


Funkcija Smartimer opozarja, da je ščetkanje končano, tako da se zobna ščetka po dveh minutah samodejno izkluči. Zobozdravniki priporočajo, da ustno votlino čistite vsaj dve minuti.


## PODNOŽJE POLNILNIKA ZA OVIJANJE KABLA NA LUKSUZNEM POLNILNIKU (NEKATERI MODELI)

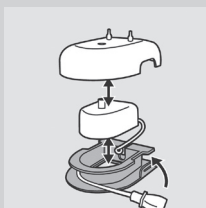

Če ima vaš model pokrov in podnožje za luksuzni polnilnik, je potovalni polnilnik pod pokrovom. Če želite skrajšati električni kabel, lahko ostanek kabla ovijete okoli podnožja polnilnika.

1. Pritisnite na dve sivi prečki na podnožju polnilnika, da ločite pokrov polnilnika in podnožje, ter dvignite pokrov.
2. Odvečni kabel ovijte okoli sivega podnožja polnilnika, kot je prikazano na sliki. Bodite pozorni na to, da ste kabel ovili po žlebu.

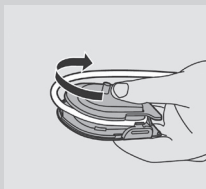


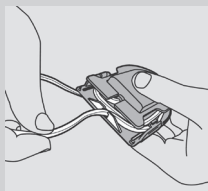

3. Ko ste shranili odvečni kabel, izvlcite električni kabel skozi žlebiček na zadnjem delu sivega polnilnika.
4. Ponovno pritrdite pokrov polnilnika, tako da pritisnete navzdol čez podnožje polnilnika, dokler se ne zaskoči.


*Nasvet: Na potovanjih lahko potovalni polnilnik odstranite ter ga uporabite brez pokrova in podnožja.*

## OVIJANJE KABLA NA UV-ČISTILCU (UV SANITIZER) Z VGRAJENIM POLNILNIKOM

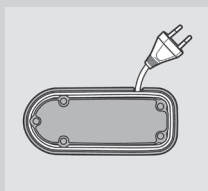

- Če ima vaš model UV-čistilec (UV Sanitizer), lahko odvečni kabel shranite na dnu čistilca.


## UV-ČIŠČENJE (SANITIZING)

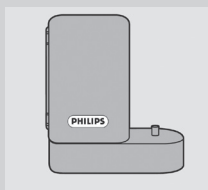

- Nastavke lahko po vsaki uporabi očistite z UV-čistilcem (UV Sanitizer).

**Prenehajte uporabljati UV-čistilec, če še gori UV-žarnica, kadar so odprta vratca ali če je logotip Philips zlomljen oziroma počen ali če ga ni na vratcih. UV-svetloba lahko škodi človeškim očem ali koži. Ta naprava mora biti nenehno nedosegljiva otrokom.**

**Izključite UV-čistilec, če ste med delovanjem UV-čistilca (UV Sanitizer) opazili dim ali vonj po dimu.**

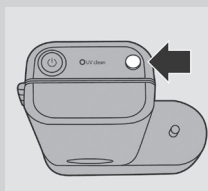

1. Po čiščenju zob očistite nastavek in otrsrite odvečno vodo. **Med UV-čiščenjem na nastavek ne dajajte potovalne kapice.**

2. Vrata UV-čistilca odprite s pritiskom na gumb za odpiranje vrat.



3. Nastavek postavite na enega od dveh kljukic v UV-čistilcu.

- Bodite pozorni na to, da so ščetine nastavka usmerjene neposredno v žarnico.

**Pomnite! V UV-čistilcu čistite samo nastavke Sonicare ProResults.**

4. Preverite, ali je UV-čistilec vključen v vtičnico s pravo napetostjo.

5. Zaprite vratca in pritisnite zeleni gumb za vklop/izklop, da sprožite cikel čiščenja.


**Pomnite! UV-čistilec (UV Sanitizer) lahko vklopite le, če so vratca pravilno zaprta. Pomnite! UV-čistilec (UV Sanitizer) se ustavi, če med čiščenjem odprete vratca. Pomnite! Čiščenje traja 10 minut, nato se samodejno konča.**

- UV-čiščenje poteka, kadar modra svetloba sveti skozi logotip Philips in UV-lučka LED počasi utripa.
- Ko je UV-čiščenje zaključeno, UV-lučka LED sveti zeleno, UV-čistilec pa se samodejno izklopi.

## ČIŠČENJE

Nastavkov, držala, potovalnega polnilnika in UV-čistilca ne čistite v pomivalnem stroju.

### DRŽALO

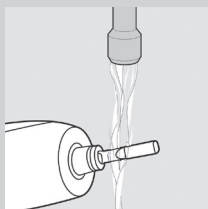


1. Odstranite nastavek in splaknite jekleni zatič.

**Na gumeno zaporko na jeklenem zatiču ne pritiskajte z ostrim predmetom, ker lahko pride do poškodb.**

2. Celotno držalo obrišite z vlažno krpo.

### NASTAVEK

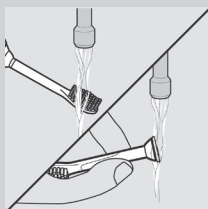


1. Po vsaki uporabi splaknite nastavek in ščetine.
2. Vsaj enkrat na teden odstranite nastavek z držala in s toplo vodo splaknite spodnji del nastavka.

### POLNILNIK


1. Izklopite polnilnik.
2. Samo nekateri modeli: razstavite polnilnik, tako da odstranite potovalni polnilnik.
3. Z vlažno krpo obrišite površino polnilnika.

### UV-ČISTILEC (UV SANITIZER) (NEKATERI MODELI)

**Ne čistite UV-čistilca, kadar je UV-žarnica vroča.** Za optimalno učinkovitost je priporočljivo, da UV-čistilec očistite enkrat na teden.

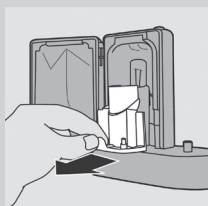

1. Izklopite UV-čistilec.
2. Rahlo dvignite posodico za odtekanje kapljic in jo izvlecite. Nato jo splaknite in z vlažno krpo obrišite do čistega.
3. Vse površine reflektorja očistite z vlažno krpo.

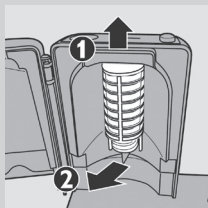

4. Odstranite zaščitno rešetko pred UV-žarnico, tako da jo nežno dvignete (1) in jo izvlečete (2).
5. Odstranite UV-žarnico, tako da jo primete in potegnete iz jeklenega kavlja.
6. Zaščitno rešetko in UV-žarnico očistite z vlažno krpo.
7. Ponovno vstavite UV-žarnico, tako da dno žarnice najprej poravnate z jeklenim kavljem, nato pa jo potisnete vanj.
8. Ponovno namestite zaščitno rešetko, tako da kljukice na rešetki poravnate z odprtnicami na refleksni površini zraven UV-žarnice. Nato kljukice vstavite v odprtine, zaščitna rešetka pa naj zdrsne navzdol, tako da je pritrjena v UV-čistilec.

## SHRANJEVANJE

- Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, jo izklopite iz električnega omrežja, očistite in shranite na hladnem in suhem, stran od neposredne svetlobe. Električni kabel navijte na navijalec.
- Nastavek lahko shranite na kljukicah na zadnjem delu polnilnika (odvisno od modela).

## ZAMENJAVA NASTAVKOV

- Za optimalne rezultate je treba nastavke zamenjati vsake 3 mesece.
- Uporabljajte samo nastavke Sonicare ProResults.

## ODSTRANITEV IZ OKOLJA




- Akumulacijske baterije v notranjosti držala ne morete zamenjati, jo pa lahko enostavno odstranite in recikirate. Na koncu dobe uporabnosti naprave, in preden jo odstranite iz okolja, prosimo, odstranite akumulacijsko baterijo iz držala, tako da sledite navodilom v nadaljevanju.
- Naprave ali UV-žarnice (žarnica vsebuje živo srebro) ne odvrzite med običajne gospodinjске odpadke, ampak v zbirne odpadke. S tem varujete okolje.
- Za natančnejše informacije se pozanimajte pri lokalnem odlagališču odpadkov.


## ODSTRANITEV AKUMULACIJSKE BATERIJE

**Opozorilo! Potem ko boste držalo električne zobne ščetke Sonicare odprli, ščetka ne bo več uporabna.**


- Akumulacijsko baterijo odstranite s standardnim izvijačem. Upoštevajte osnovna varnostna navodila, tudi ko boste sledili navodilom v nadaljevanju. Poskrbite za zaščito oči, rok, prstov in površine, na kateri delate.

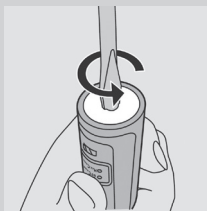

**1.** Da popolnoma izpraznite akumulacijsko baterijo, odstranite držalo iz polnilnika, ga vklopite in pustite delovati, dokler ne preneha. Ponavljajte, dokler ni popolnoma prazno.

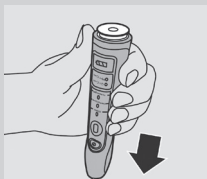

**2.** V žleb na dnu držala vstavite izvijač in ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, da sprostite spodnji pokrov.

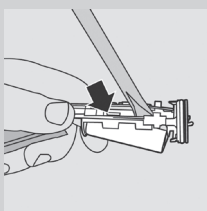

**3.** Obrnite držalo in pritisnite na zatič, da sprostite notranje sestavne dele držala.

**4.** Izvijač vstavite pod električno mrežno ploščico, zraven stika z baterijo, in obrnite, da prekinete kontakt. Iz plastičnega nosilca odstranite električno mrežno ploščico in baterijo. Akumulacijsko baterijo lahko nato reciklirate, ostale dele proizvoda pa pravilno odvržete.

## GARANCIJA IN SERVIS

Garancija velja dve leti od dneva nakupa.

Izjava: uvoznik jamči za kakovost blaga oz. za brezhibno delovanje v garancijskem roku (dve leti), ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija se nanaša na držalo, polnilnik in UV čistilec ne pa na nastavke s ščetko in UV-žarnico.

Garancija se ne nanaša na normalno obrabo izdelka, kot so praske, odrgnine, abrazija materiala, razbarvanje materiala.

Garancija za držalo in polnilnik vaše zobne ščetke Sonicare FlexCare velja dve leti od dneva nakupa. Če držalo ali polnilnik zaradi katerega koli vzroka v prvih dveh letih uporabe ne bi več delovala, bo proizvajalec oz. dobavitelj (podjetje Flegis, d. o. o., v Sloveniji) okvarjene dele brezplačno zamenjal z novimi (velja za polnilnik in držalo, ne pa za nastavke).

Okvarjeni izdelek lahko dostavite dobavitelju, prodajalcu ali enemu od najbližjih pooblaščenih servisov, ko so navedeni na priloženem seznamu.

Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom, uporabe z električnimi pretvorniki ali transformatorji in mehanske poškodbe so pri tem izvzete.

Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca. Če garancijski list ni pravilno izpolnjen, predložite račun.

Garancija preneha, če je bilo ugotovljeno, da je v proizvod posegla nepooblaščen oseba ali je vanj vgrajen neoriginalni del.

Po preteku garancijskega roka bo proizvajalec nadomestne dele zagotavljal še 3 leta. V primeru uveljavljanja garancije pokličite na telefonsko številko 02/460 53 46.

## REŠEVANJE MOREBITNIH TEŽAV

Če težave ne boste mogli rešiti z naslednjimi rešitvami, vas prosimo, da za pomoč pokličete dobavitelja, podjetje Flegis, d. o. o., na telefonsko številko 02/460 53 46.

Težava	Rešitev
Zobna ščetka Sonicare® ne dela.	Morda je treba napolniti držalo. Držalo polnite vsaj 24 ur.
	Prepričajte se, da je polnilnik priključen na električno omrežje. Preverite, ali imate morda vgrajeno vtičnico, v kateri ni električnega toka, kadar v kopalnici ugasnete luč.
	Morda je treba ponovno namestiti nastavek ali ga zamenjati z novim.
Kadar uporabljam Sonicare®, občutim žgečkanje.	To je povsem običajno. Zobno ščetko Sonicare® lahko uporabljate naprej, ščetin ne pritiskajte močno na zobe in dlesni. Z vsako nadaljnjo uporabo bo občutek žgečkanja manjši.
Nastavek ob mojih zobeh ropota.	Temu se lahko izognete, tako da nastavek pravilno postavite s ščetinami na rob dlesni in pod kotom.
Zdi se mi, da jakost ščetke popušča.	Morda je treba napolniti držalo.
	Preverite, ali morda ni vključena funkcija Easy-Start®. Izključite jo.
	Morda je treba zamenjati nastavek.
Zakaj gumb za nastavitve ščetkanja po meri ne dela med ščetkanjem?	Najbrž ste izbrali program čiščenja, tako da gumb za osebne nastavitve ni vključen.
Zakaj ne deluje UV-čistilec (UV Sanitizer)?	Morda je treba UV-čistilec vključiti v vtičnico.
	Morda je treba zapreti vrata UV-čistilca.
	Morda je treba zamenjati UV-žarnico.
Zdi se mi, da jakost ščetke med ščetkanjem popušča.	Funkcija nastavljiv Quadpacer je bila nastavljena na 2,5-minutno ščetkanje. Ta funkcija je namenjena čiščenju kritičnih mest, kjer se nabira plak in prihaja do težav z dlesnimi. Priporočamo, da teh dodatnih 30 sekund izkoristite za čiščenje kritičnih mest, masažo dlesni ali čiščenje jezika (glejte poglavje Funkcije).
Ali na potovanju potrebujem poseben polnilnik?	Nasvet: Polnilnik Sonicare in UV-čistilec se lahko uporabljata z vsemi napetostmi po svetu med 100–240 AC pri 50 ali 60 Hz. Vse, kar potrebujete, je adapter za vtičnico.

Zastopnik za Slovenijo

*flegis*



Zdrav nasmeh  
je uspeh!

FLEGIS, d. o. o.  
Perhavčeva ulica 36  
2000 Maribor

Tel: 02/460 53 46  
Faks: 02/460 53 43  
E-pošta: [info@flegis.si](mailto:info@flegis.si)  
[www.flegis.si](http://www.flegis.si)

Datum prodaje:

Žig in podpis prodajalca: